



SebDoki asztali alkalmazás használati útmutatója




Kiadás dátuma: 2025. január


Fejlesztő és karbantartó: HARTMANN-RICO Hungária Kft.

I. Telepítési útmutató

A SebDoki alkalmazás legfrissebb telepítőfájlját a www.sebdoki.hu weboldal letöltések menüpontjából érheti el. Az alkalmazás Windows 10 és 11 operációs rendszereken futtatható, de javasoljuk a Windows 11 használatát a legjobb teljesítmény érdekében.

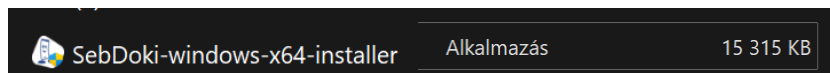

1. **Telepítő elindítása:** Amennyiben Windows Defender figyelmeztetést kap a telepítő futtatásakor, kattintson a „További információ” lehetőségre, majd válassza a „Futtatás mindenképpen” opciót.

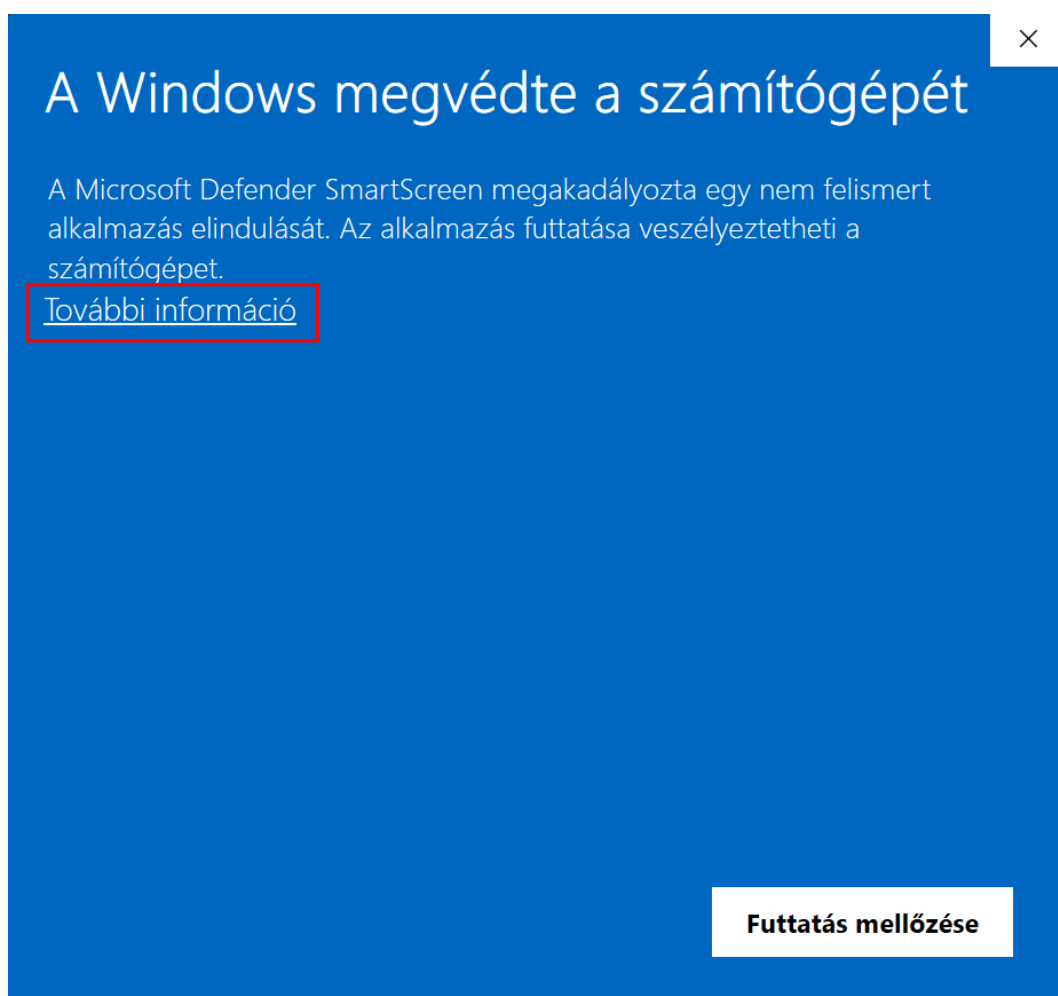



A Windows megvédte a számítógépet

A Microsoft Defender SmartScreen megakadályozta egy nem felismert alkalmazás elindulását. Az alkalmazás futtatása veszélyeztetheti a számítógépet.


Alkalmazás: SebDoki-windows-x64-installer.exe

Gyártó: HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Futtatás mindenképpen

Futtatás mellőzése


2. **Felhasználói fiókok felügyelete:** A Windows rákérdez, hogy szeretné-e futtatni a telepítőfájlt. Kattintson az „Igen” lehetőségre a telepítés megkezdéséhez.

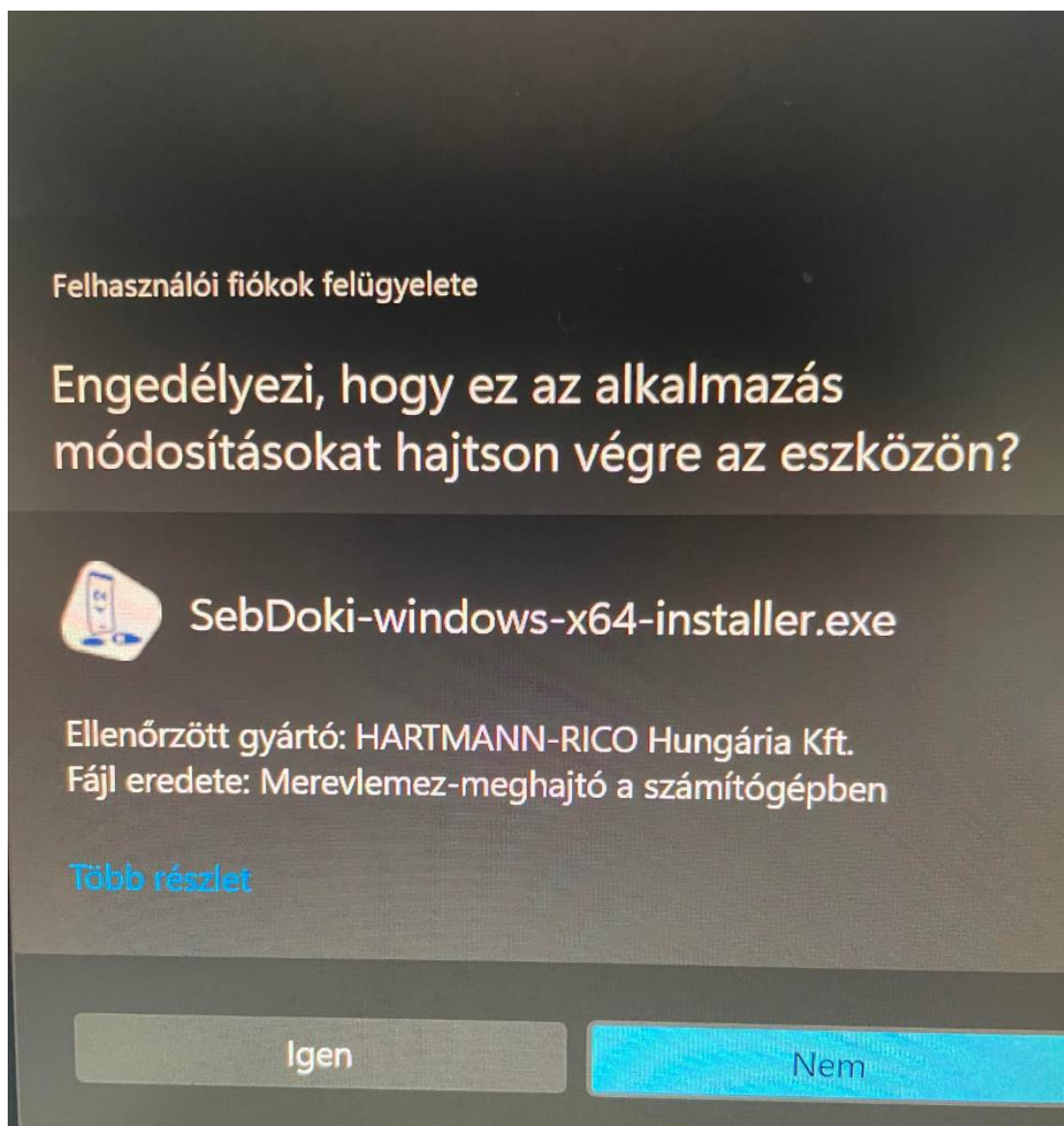



3. **Telepítési varázsló követése:** A SebDoki Beállítás Varázslója végig vezeti önt a folyamaton. Kövesse az egyes ablakokban megjelenő utasításokat.




4. **Licencfeltételek elfogadása:** A telepítés megkezdése előtt olvassa el a licenc- és felhasználói feltételeket, majd fogadja el azokat.

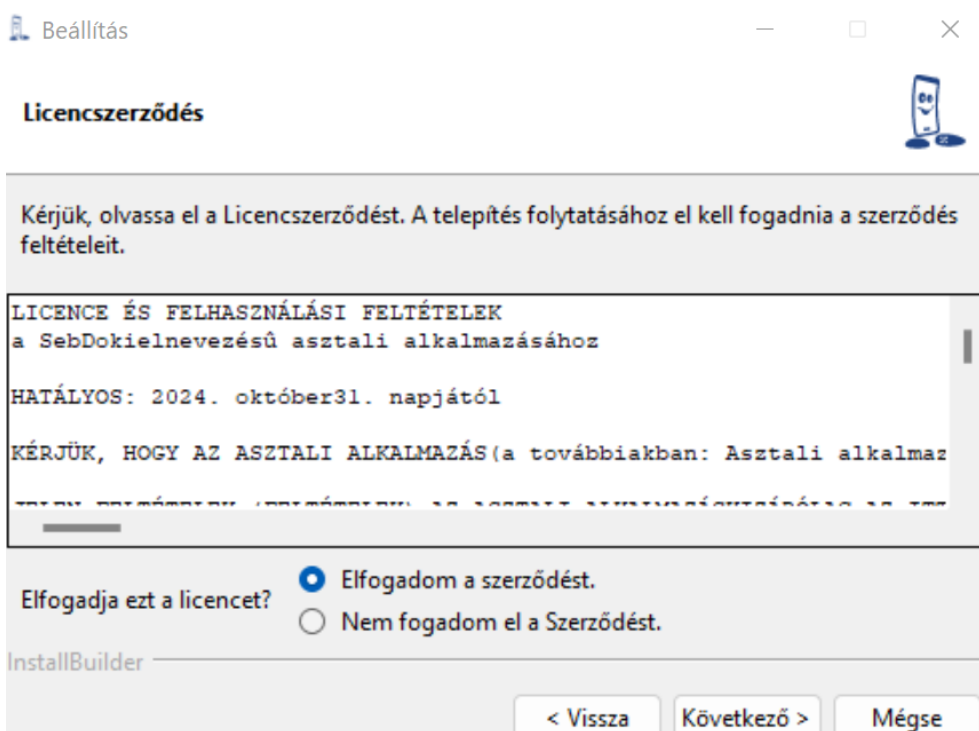

5. **Telepítési hely kiválasztása:** Válassza ki, hogy melyik könyvtárba szeretné telepíteni az alkalmazást. Javasoljuk az alapértelmezett hely használatát.

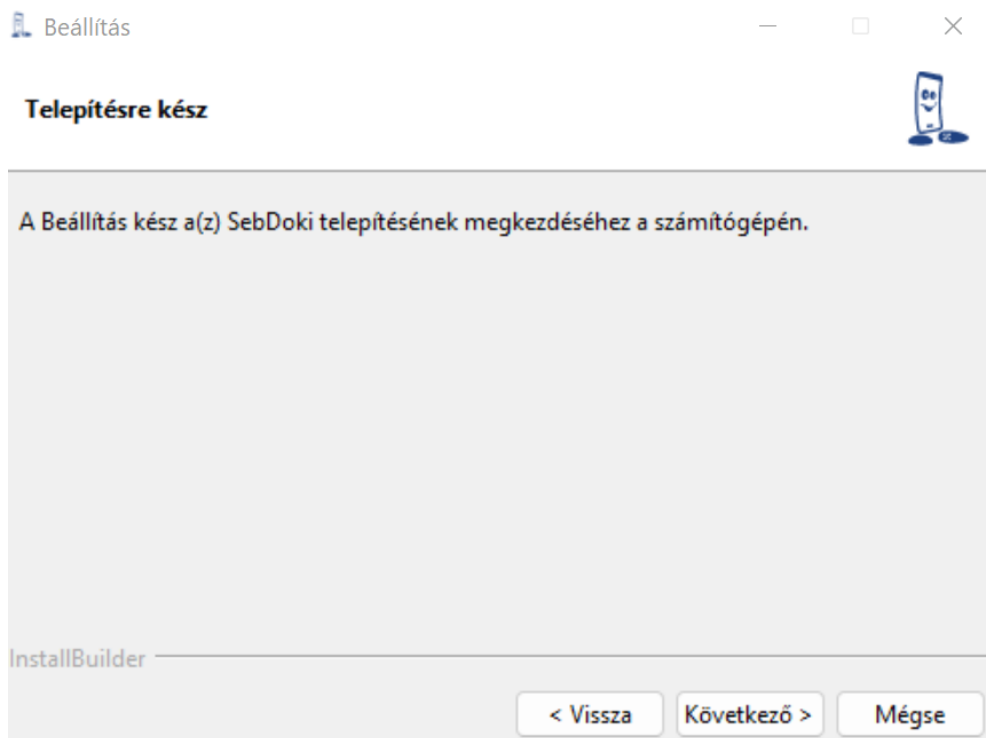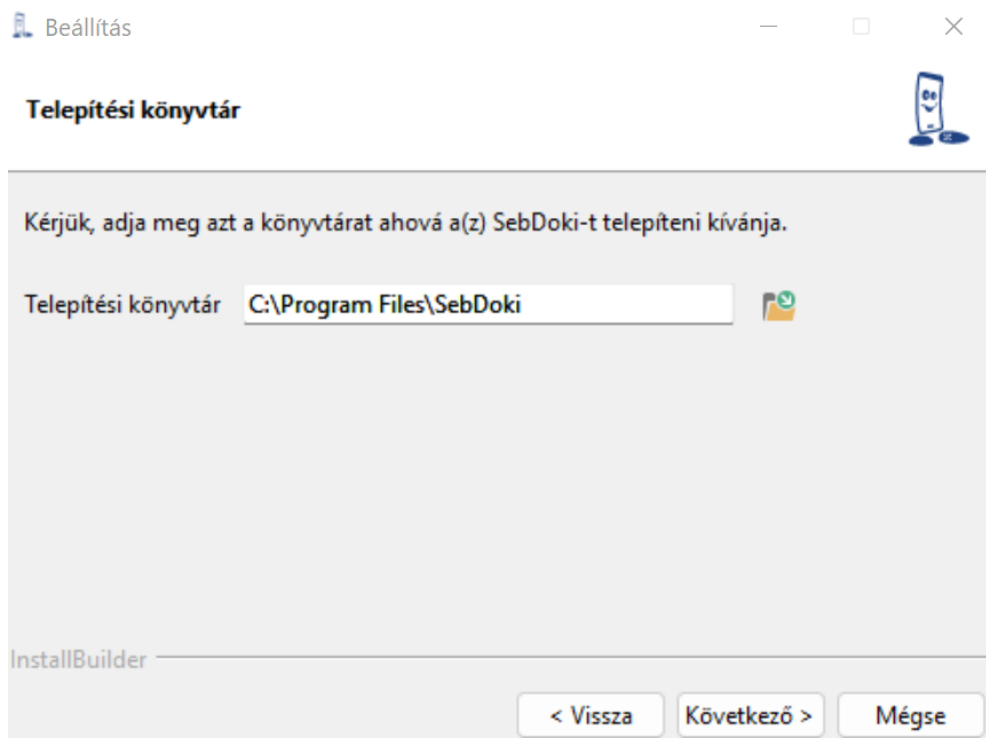


6. **Telepítés befejezése:** A telepítés végén lehetősége van a „readme” fájl megtekintésére, amely további információkat tartalmazhat.

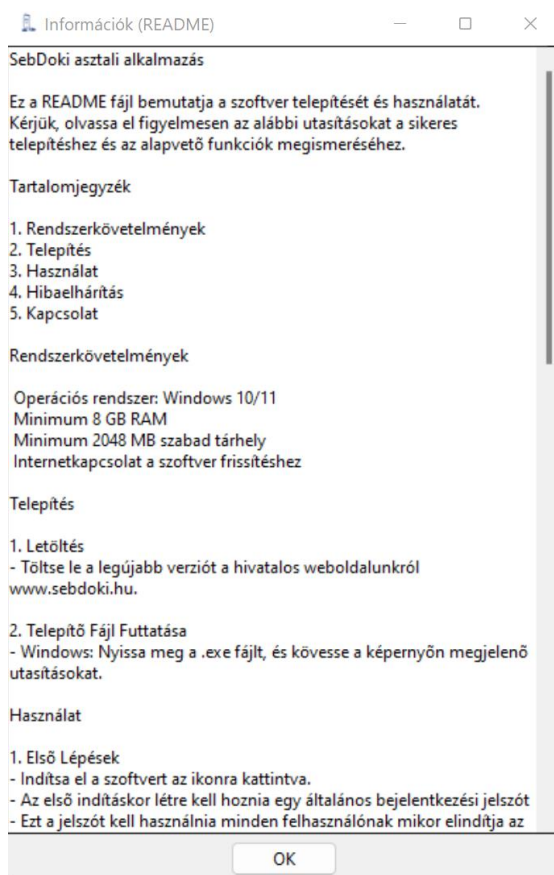


II. SebDoki asztali alkalmazás első indítása



1. Az első indításkor adjon meg egy jelszót, amellyel beléphet az alkalmazásba.

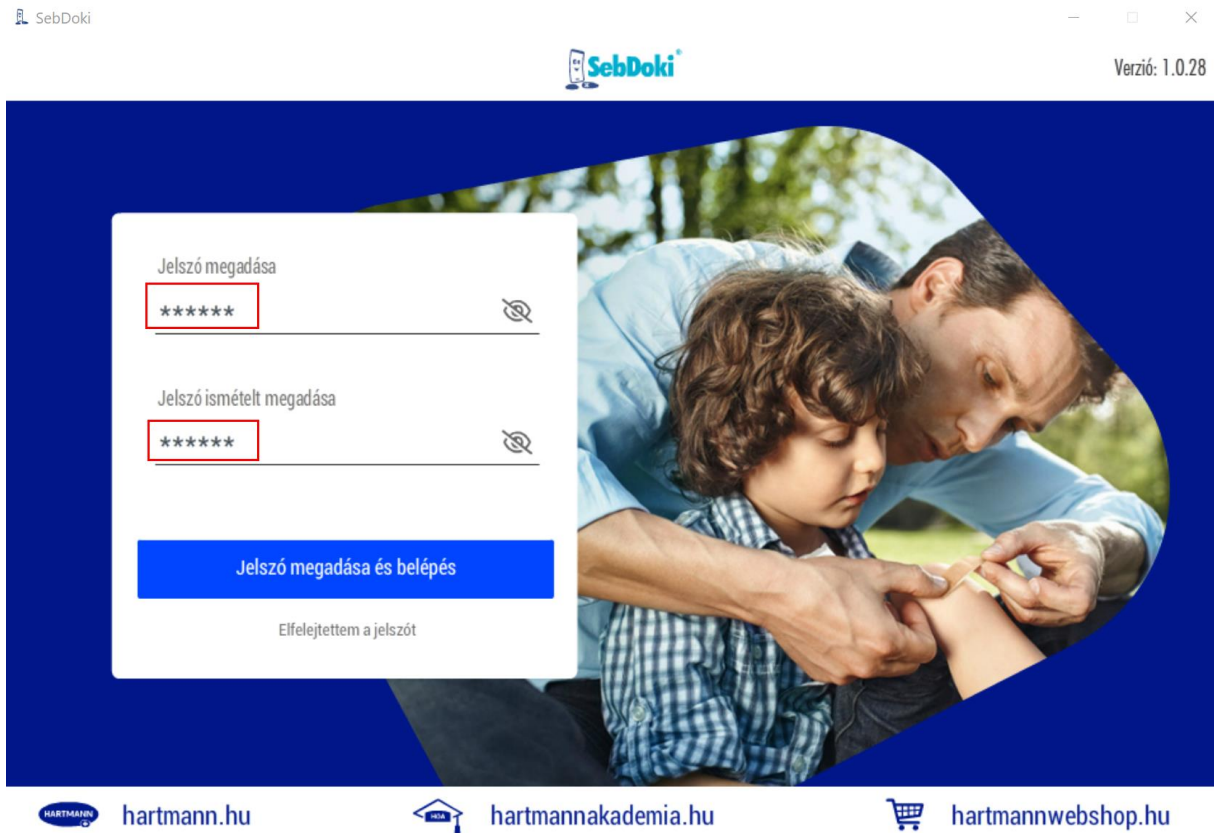

2. A Beállítások menüpont alatt módosíthatja a jelszavát. Amennyiben elfelejtette a jelszavát, válassza az „Efelejttem a jelszót” lehetőséget, és kövesse a felugró ablak utasításait.

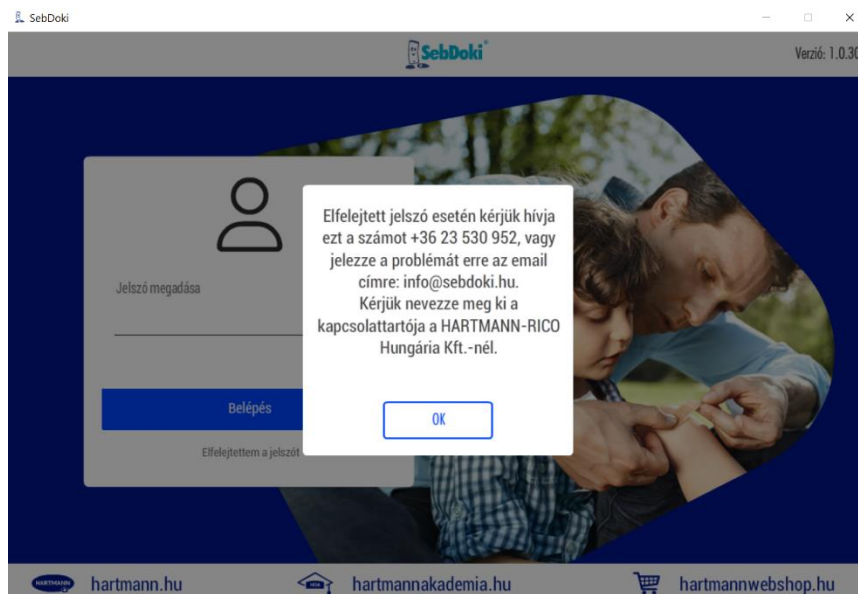


A HARTMANN IT szupportjától kapott jelszóval be fog tudni egy új jelszót állítani az alkalmazáshoz.

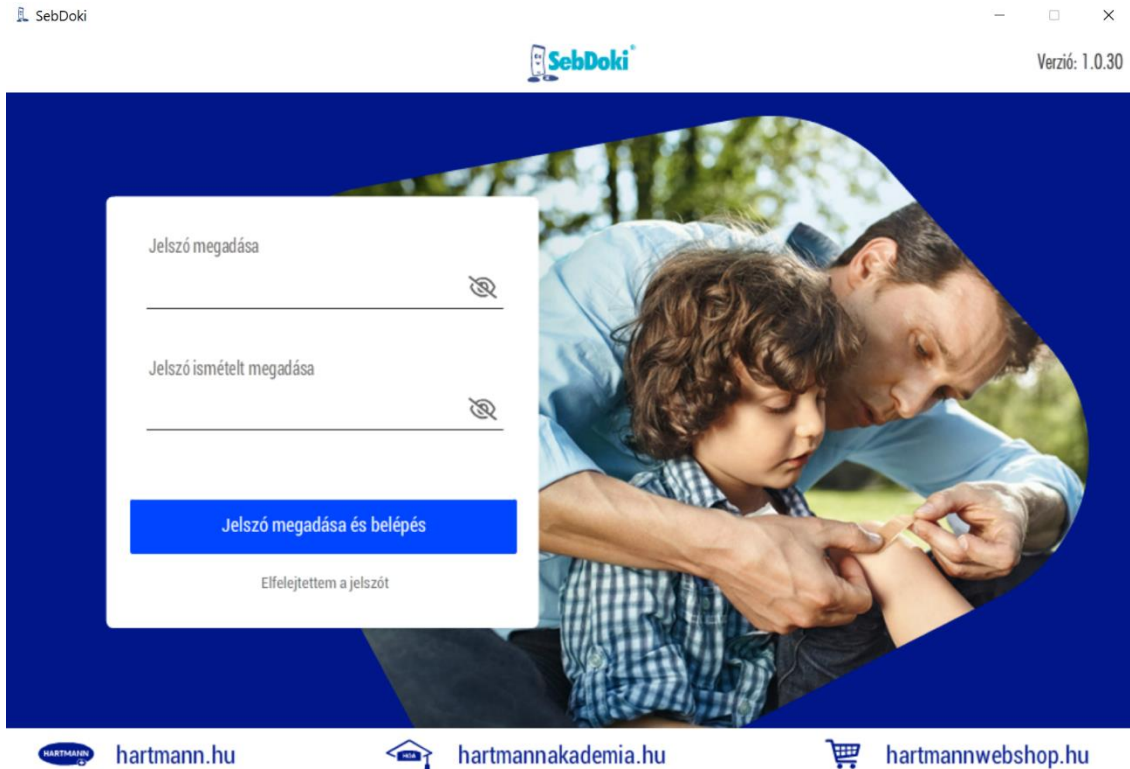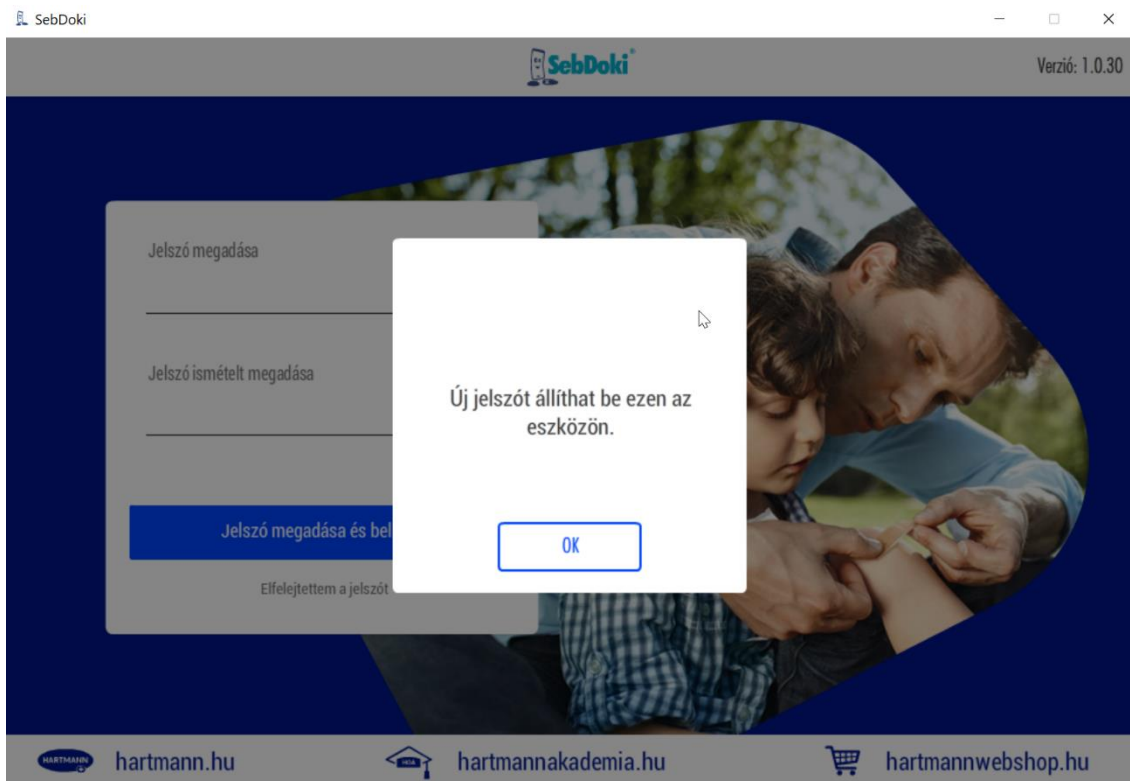

III. SebDoki asztali alkalmazás használata


Belépés után az alkalmazás főképernyője jelenik meg. A jobb felső sarokban láthatja melyik verziót használja jelenleg. Az ön verziója nem naprakész akkor a beállítások menüpontban láthatja, hogy frissítésre van szükség. Abban az esetben, ha nincs szükség frissítésre akkor „Az alkalmazás naprakész” szöveget egy zöld pipával fogja látni.

A SebDoki alkalmazás használatához, ki kell választania egy felhasználót. Első indítás során a felhasználókat a főképernyőn található „Beállítások” menüpontban tudja kezelni.

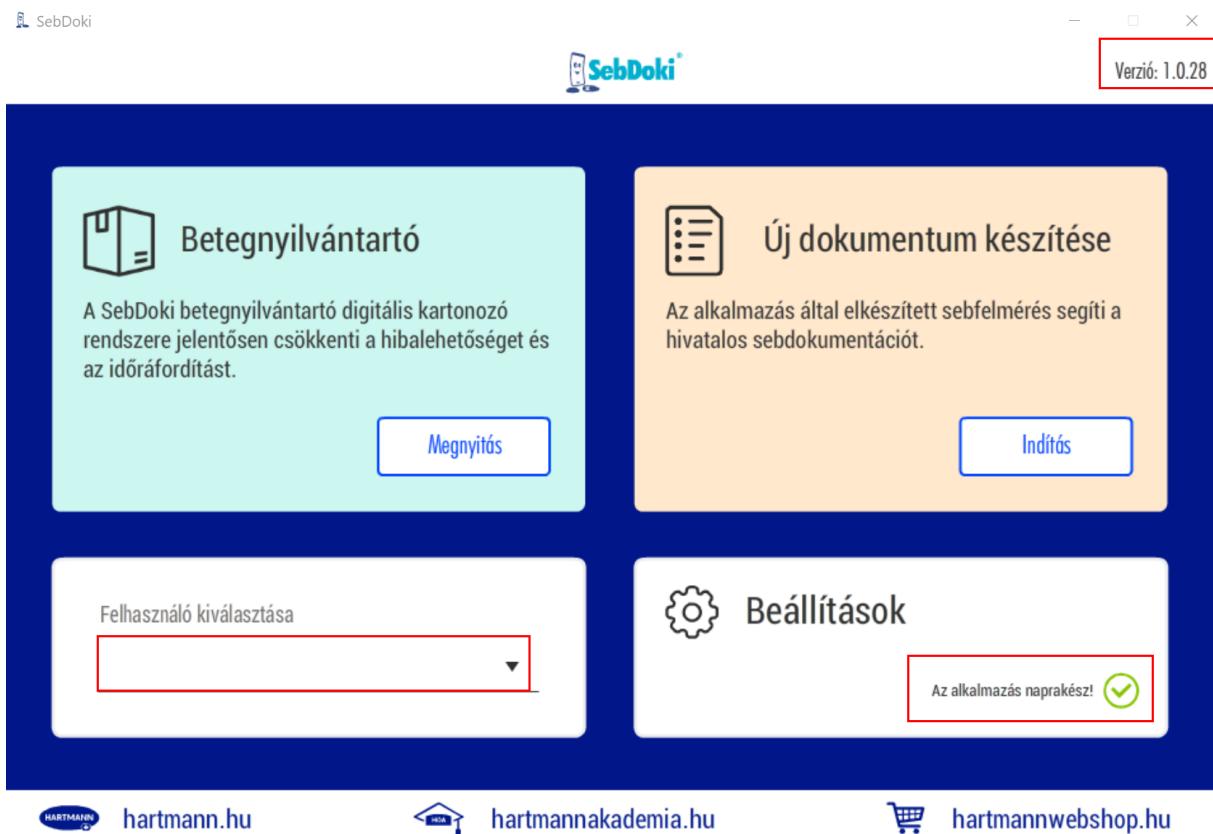

A beállítások menüpont alatt lehetősége van jelszó módosítására biztonsági mentésre felhasználók kezelésére és abban az esetben, ha a verziója nem a legfrissebb innen is el tudja indítani a legújabb verzió letöltését.


A jelszó módosítása során meg kell adni a régi jelszót ezt követően az új jelszót kell megadni és megerősíteni.

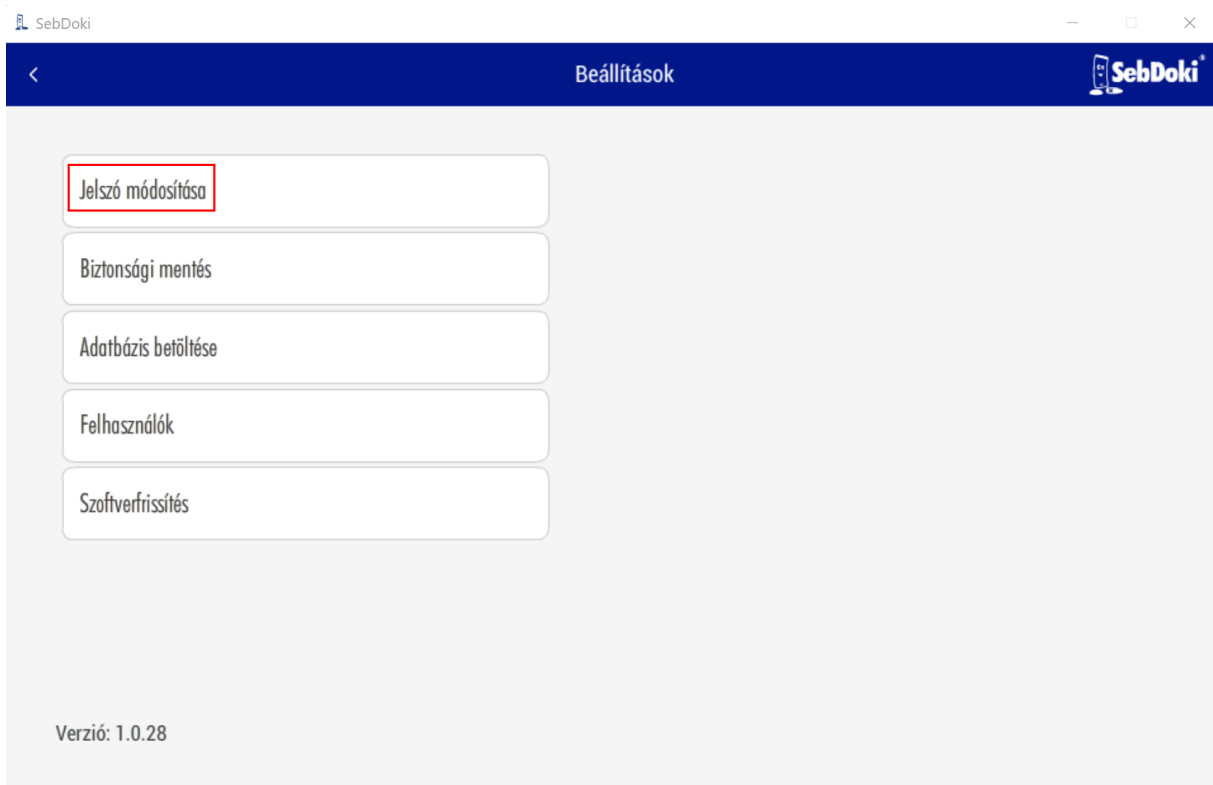

 hartmann.hu

 hartmannakademia.hu

 hartmannwebshop.hu

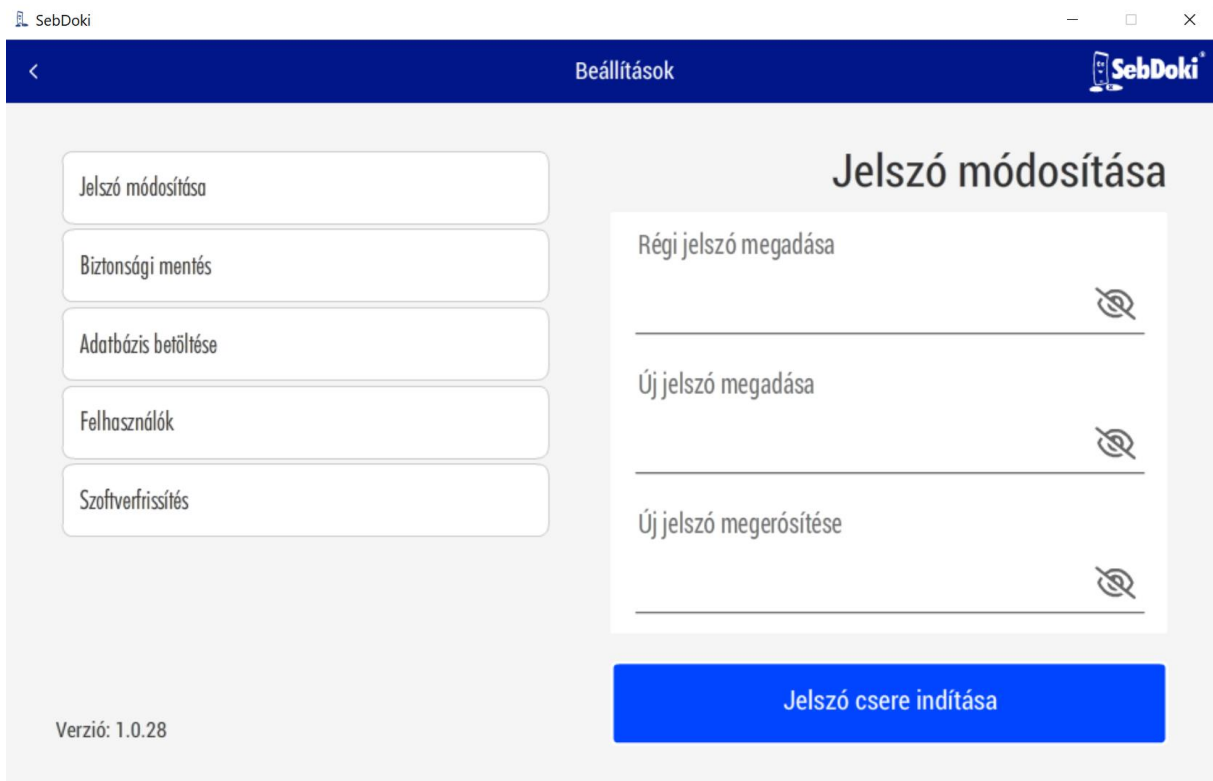


 hartmann.hu

 hartmannakademia.hu



 hartmannwebshop.hu

Javasolt időnként biztonsági mentést készíteni az adatokról. A Beállítások menüpont alatt válassza a „Biztonsági mentés” opciót, majd adja meg a mentési könyvtárat.

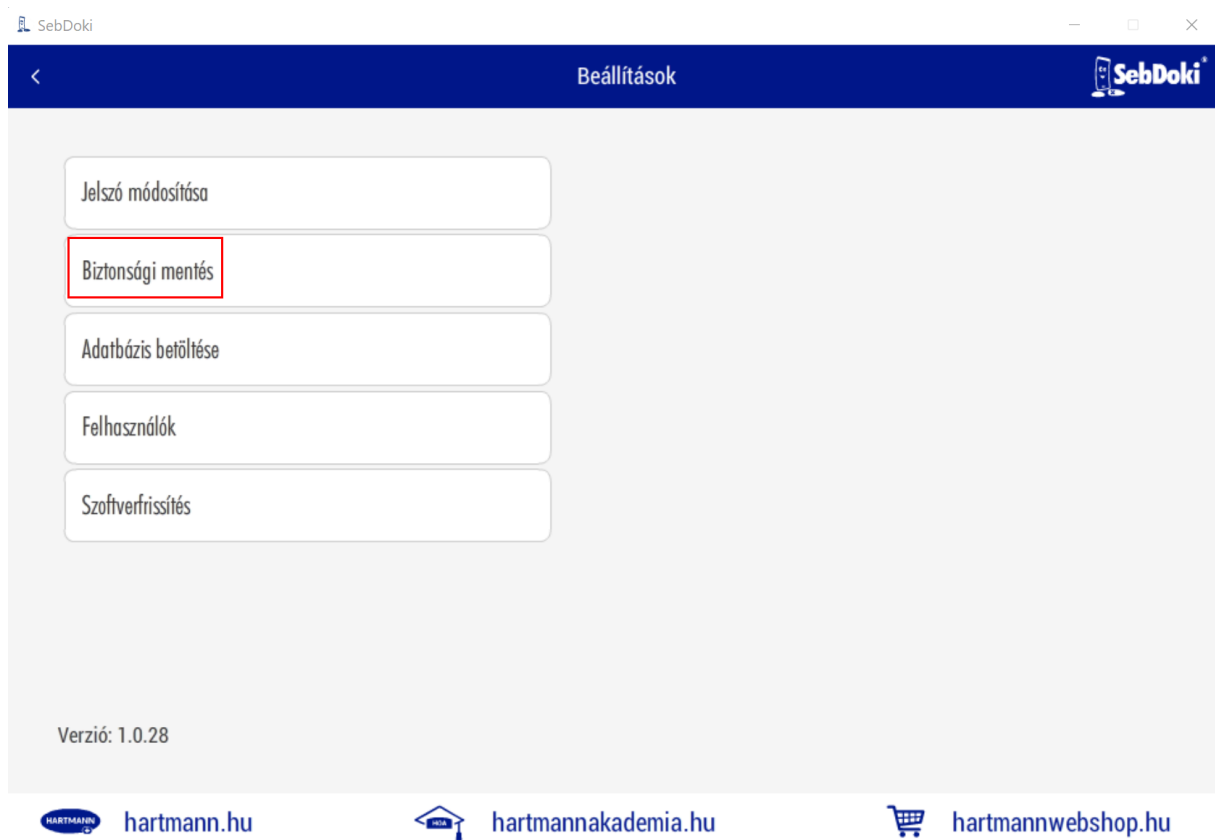


The screenshot shows a web browser window with the title 'SebDoki'. The main content area is titled 'Beállítások' (Settings) and contains a list of five settings options: 'Jelszó módosítása', 'Biztonsági mentés', 'Adatbázis betöltése', 'Felhasználók', and 'Szoftverfrissítés'. The 'Biztonsági mentés' option is highlighted with a red rectangular border. At the bottom left of the settings area, the text 'Verzió: 1.0.28' is visible. Below the settings area, there are three logos and their corresponding URLs: 'hartmann.hu', 'hartmannakademia.hu', and 'hartmannwebshop.hu'.


Az adatbázis mentéséhez először ki kell választani egy könyvtárat, ahová a mentés kerül. Az elmentett fájl alapértelmezett neve „SebDoki...” lesz, amelyet az adott év, hónap és nap követ a fájlnevében. Ha a mentési folyamat sikertelen, a képernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, jelezve, hogy az adatbázis mentése nem sikerült.

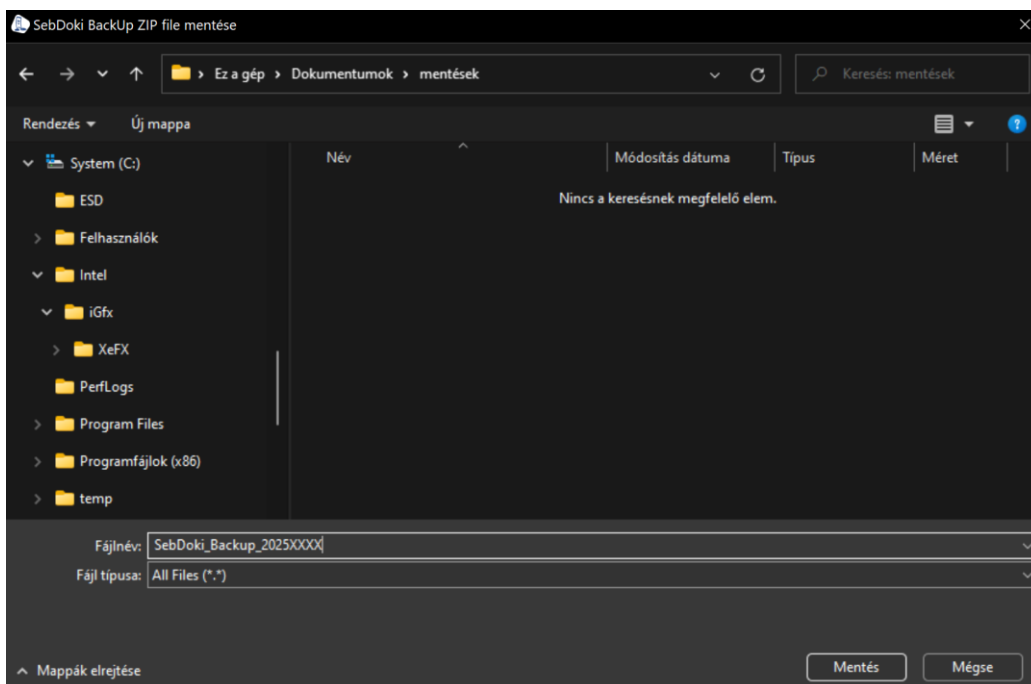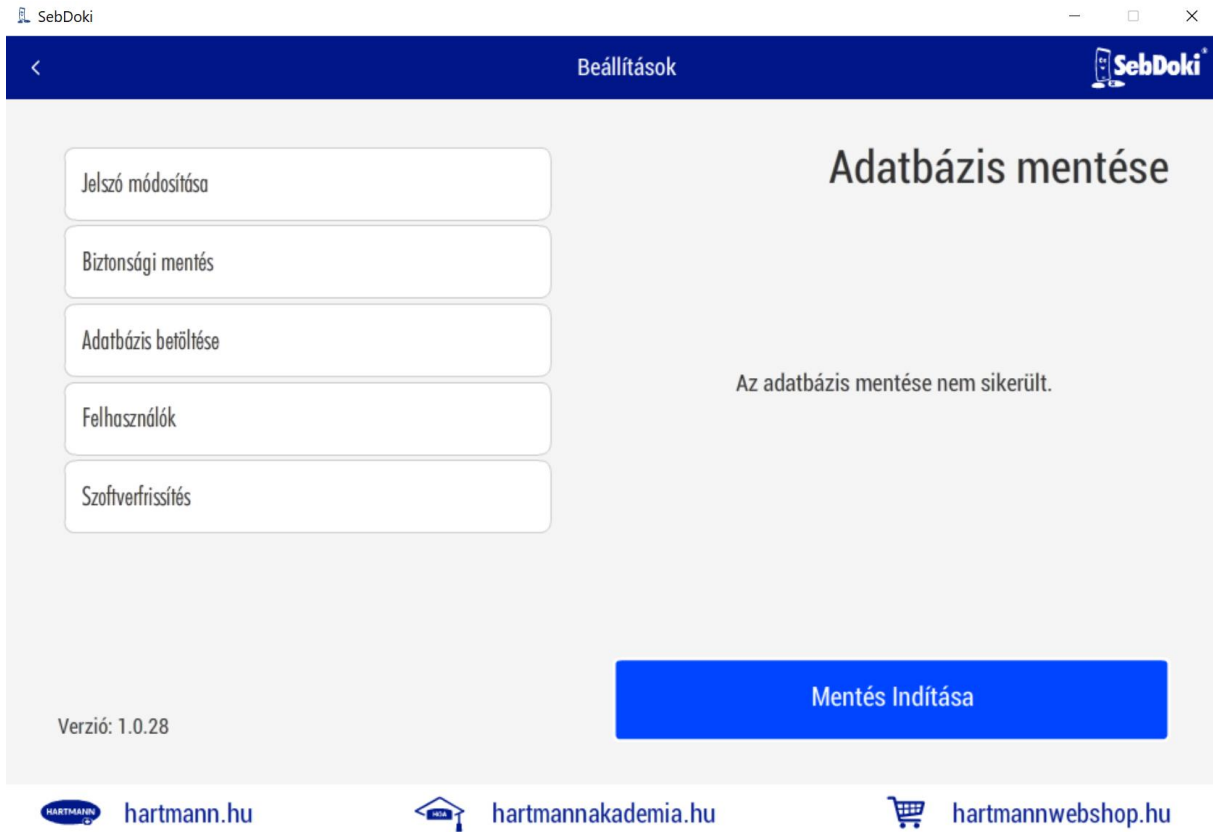

Az adatbázis betöltésekor ki kell választani, hogy melyik mentést kívánjuk visszaállítani és honnan. Fontos tudni, hogy a visszatöltés során a kiválasztott mentés felülírja a jelenlegi adatbázist, így minden eddig ezen a gépen elmentett beállítás és adat törlődik.

Az adatbázis mentése lehetővé teszi a SebDoki teljes tartalmának egyszerű átvitelét gépcsere esetén.

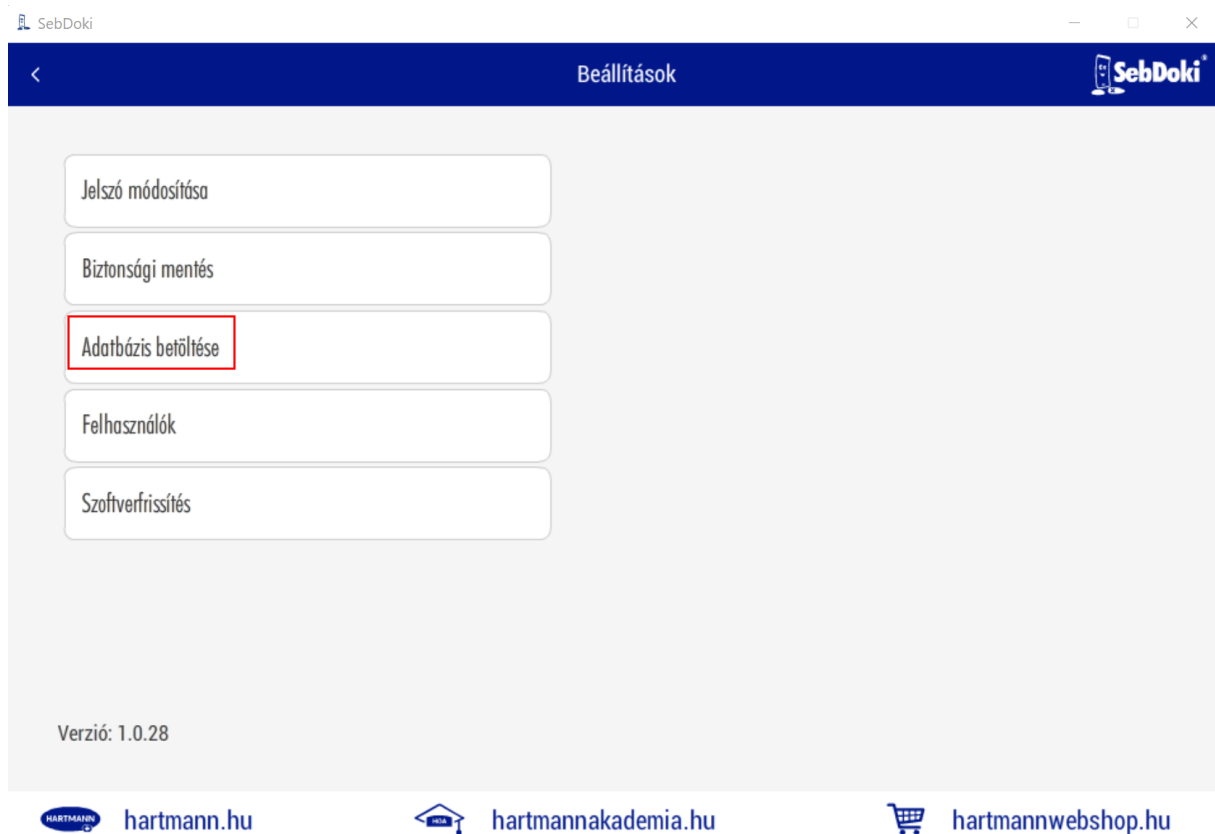

Beállítások 

Jelszó módosítása

Biztonsági mentés

Adatbázis betöltése

Felhasználók

Szoftverfrissítés

Adatbázis betöltése

A SebDoki betegnyilvántartó adatbázisának és dokumentációs fájlok betöltése zip file-ból. A kiválasztott backup file felülírja a jelenlegi adatbázist, és a jelenlegi beállításokat.

Verzió: 1.0.28

BackUp file kiválasztása

hartmann.huhartmannakademia.huhartmannwebshop.hu

Select Backup ZIP File

← → ↕ ↑ 📁 > Ez a gép > Dokumentumok > mentések 🔍 Keresés: mentések

Rendezés Új mappa

- Asztal
- Dokumentumok
- Downloads
- Képek
- Videók
- Zene
- System (C:)
 - ESD
 - Felhasználók
 - Intel
 - iGfx
 - XeFX

Név Módosítás dátuma Típus

Nincs a keresésnek megfelelő elem.

Fájlnév: ZIP Files


Megnyitás Mégse

A felhasználók kezelése során érdemes kiemelni, hogy az alkalmazás nem használ külön jelszavakat a felhasználók számára. Az alkalmazás indításához egyetlen jelszóra van szükség, ahogy azt korábban ismertettük.

A felhasználók azért fontosak, mert az elkészített sebészeti dokumentációkban megjegyzésként megjelenik, hogy melyik felhasználó készítette az adott dokumentációt.

Egy új felhasználó létrehozása egyszerű: megadjuk a nevet, majd az „Új felhasználó hozzáadása” gombbal létrehozuk. Ha egy felhasználót törölni szeretnénk, kiválasztjuk a listából, majd a „Felhasználó törlése” gombra kattintva eltávolítjuk.

Fontos megjegyezni, hogy a korábban létrehozott dokumentációkban a törölt felhasználó neve továbbra is megmarad.

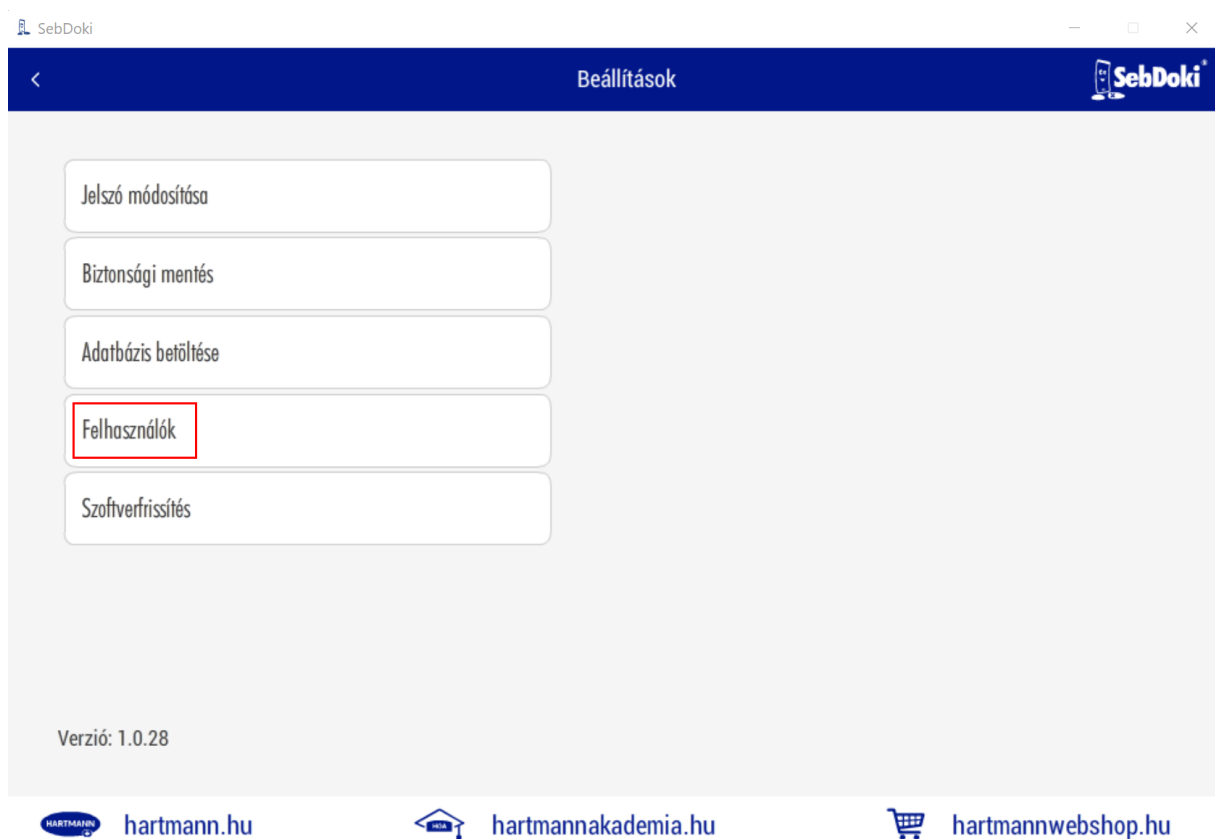

SebDoki

Beállítások

SebDoki

Jelszó módosítása

Biztonsági mentés

Adatbázis betöltése

Felhasználók

Szoftverfrissítés

Új felhasználó létrehozása

Seb Doki

Új felhasználó hozzáadása

Verzió: 1.0.29

 hartmann.hu

 hartmannakademia.hu

 hartmannwebshop.hu

SebDoki

Beállítások

SebDoki

Jelszó módosítása

Biztonsági mentés

Adatbázis betöltése

Felhasználók

Szoftverfrissítés

Új felhasználó létrehozása

Név megadása

Seb Doki

Új felhasználó hozzáadása

Verzió: 1.0.29

 hartmann.hu

 hartmannakademia.hu

 hartmannwebshop.hu

Kiválasztott felhasználó törlése


Seb Doki





Seb Doki

Felhasználó törlése


Ha a főképernyő beállítások ablakában azt az értesítést kapjuk, hogy a szoftver nem naprakész, akkor a beállítások menüben található legalsó „Szoftverfrissítés” gomb segítségével letölthetjük a legújabb verziót. A letöltött telepítő fájl futtatása előtt zárjuk be a SebDoki alkalmazást. Javasolt, hogy a frissítés előtt készítsünk egy biztonsági mentést. A letöltési folyamat során a Windowsra telepített böngészőt használhatjuk, például a Google Chrome-ot, az Edge-et vagy más böngészőket.

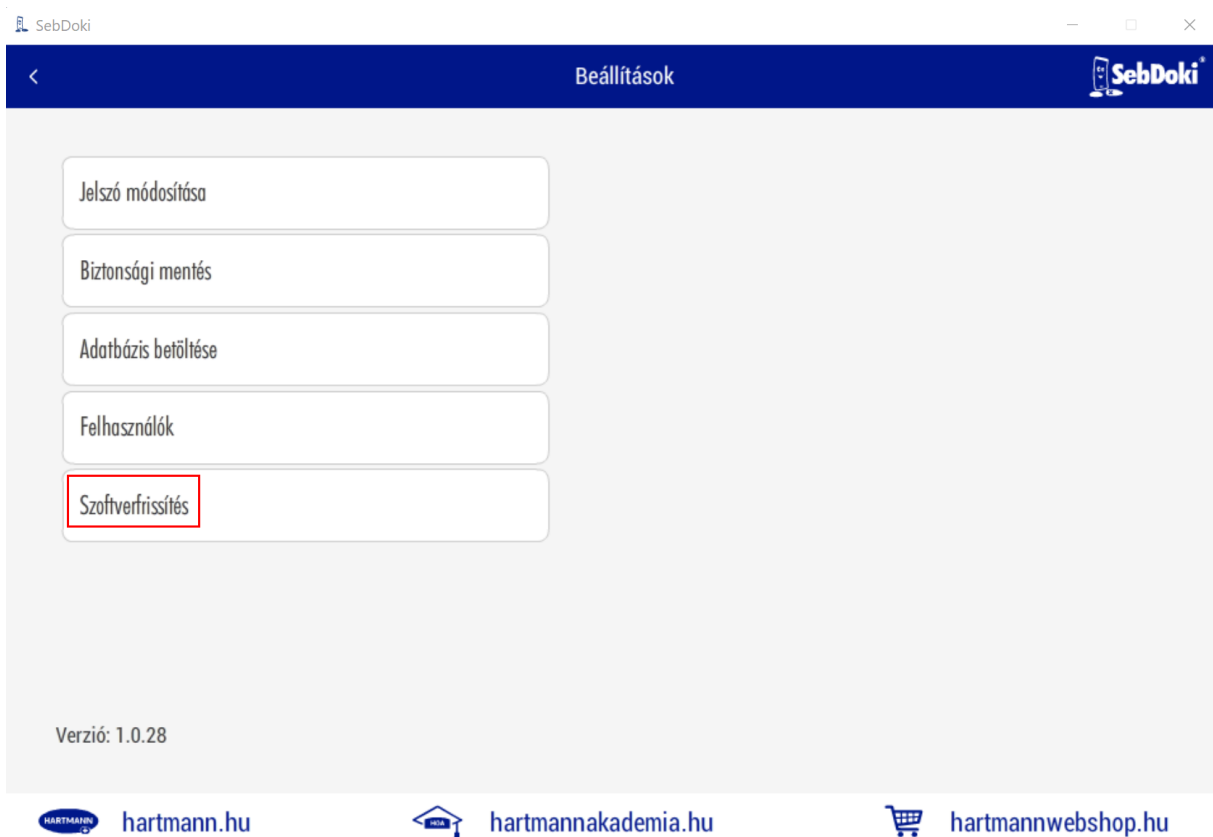


Miután hozzáadtuk a felhasználót, a főképernyőn kiválaszthatjuk, hogy melyik felhasználóval szeretnénk használni a SebDoki alkalmazást.

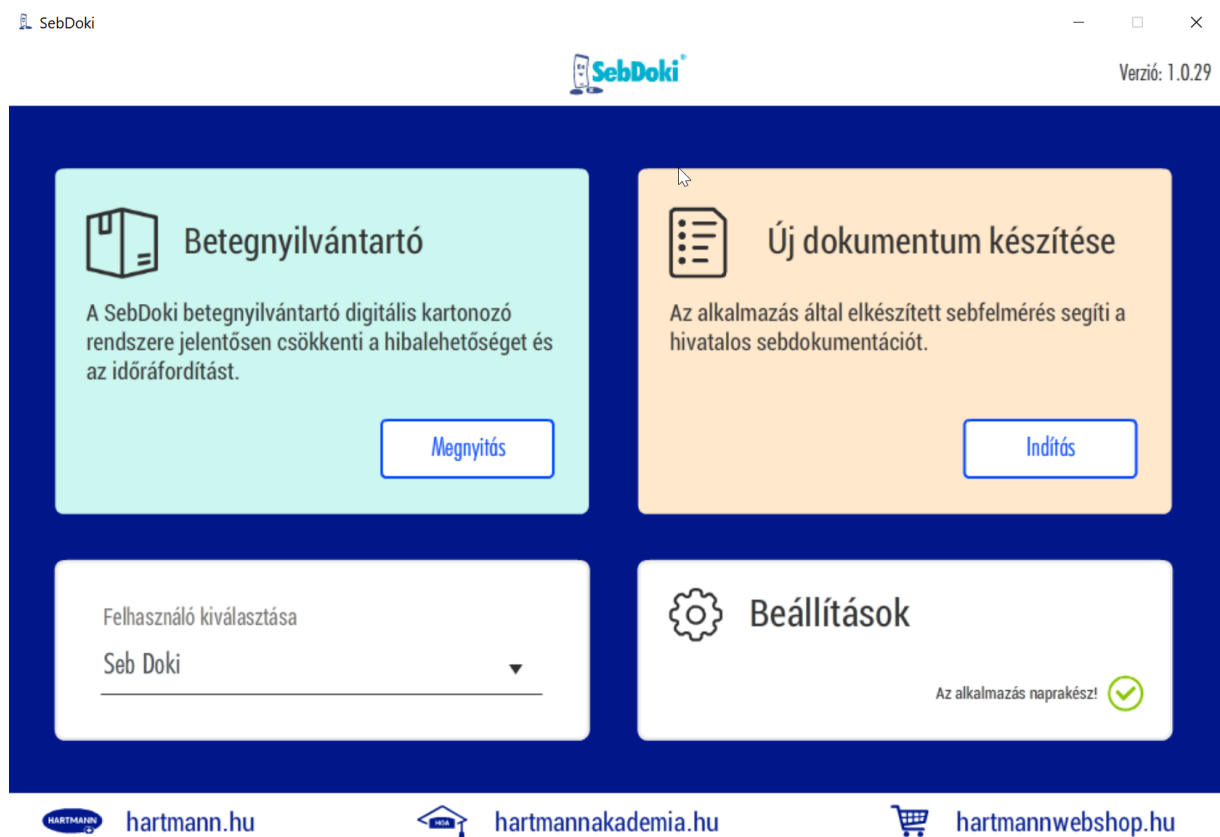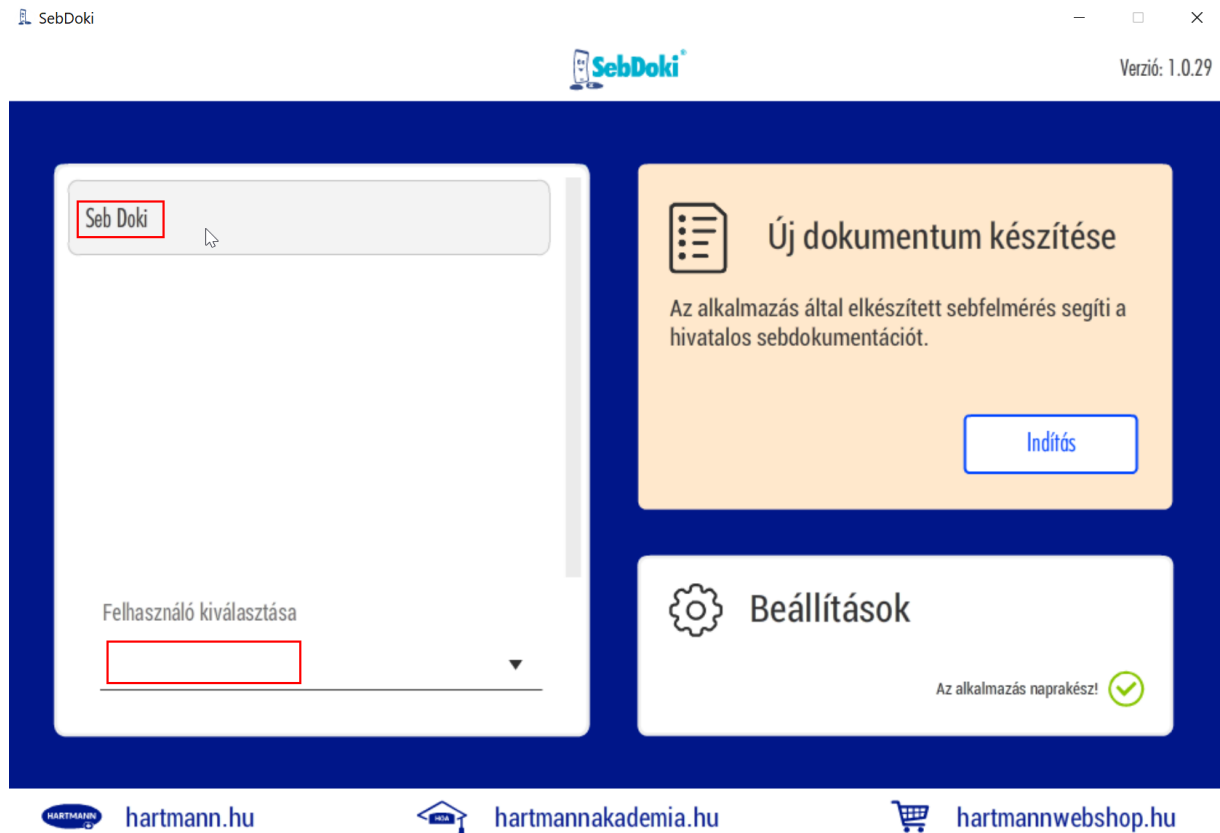

Most már készen állunk a SebDoki asztali alkalmazás használatára a sebdokumentációk létrehozásához. Az alkalmazás két fő menüpontot kínál: az egyik a betegek, a másik a dokumentumok kezelésére szolgál. Első lépésként nyissuk meg a betegnyilvántartó menüpontot.

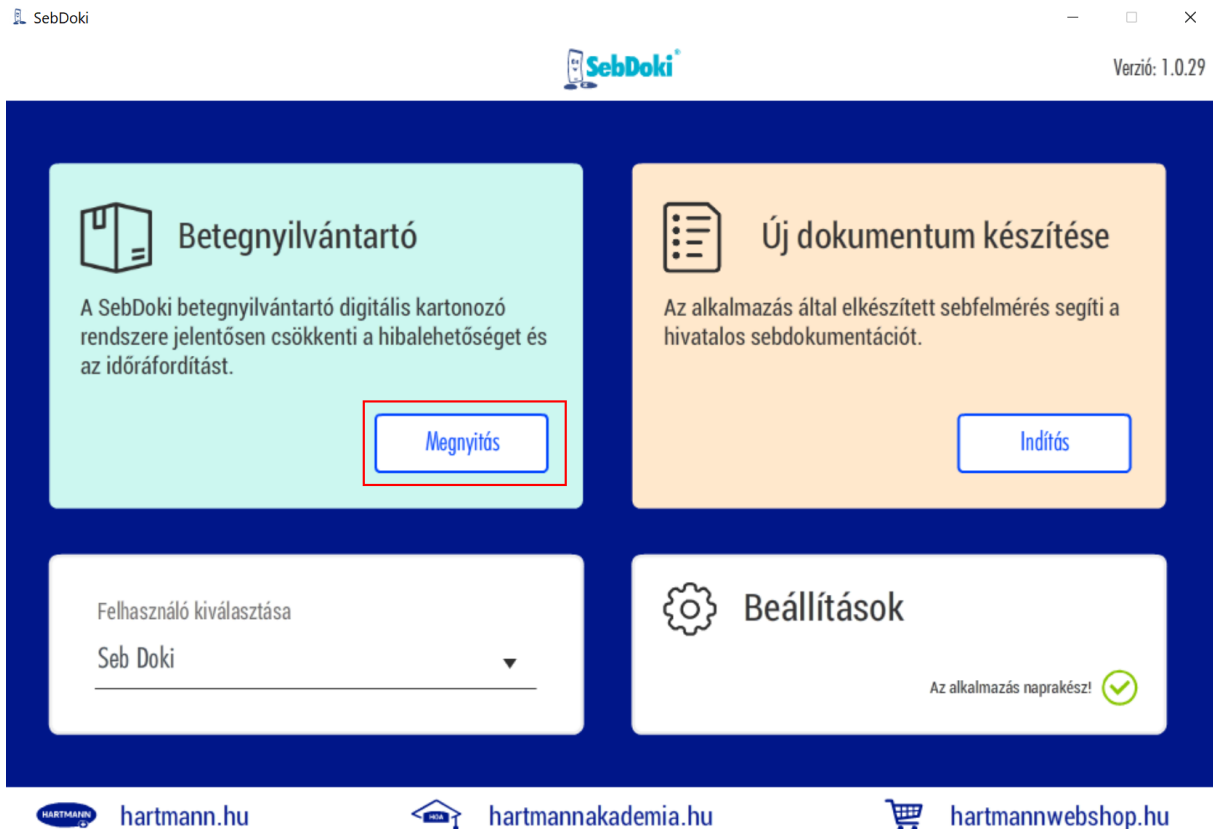

Az „Új páciens felvétele” opcióban az „Indítás” gombra kattintva könnyedén rögzíthetünk egy új beteget a nyilvántartásunkba.

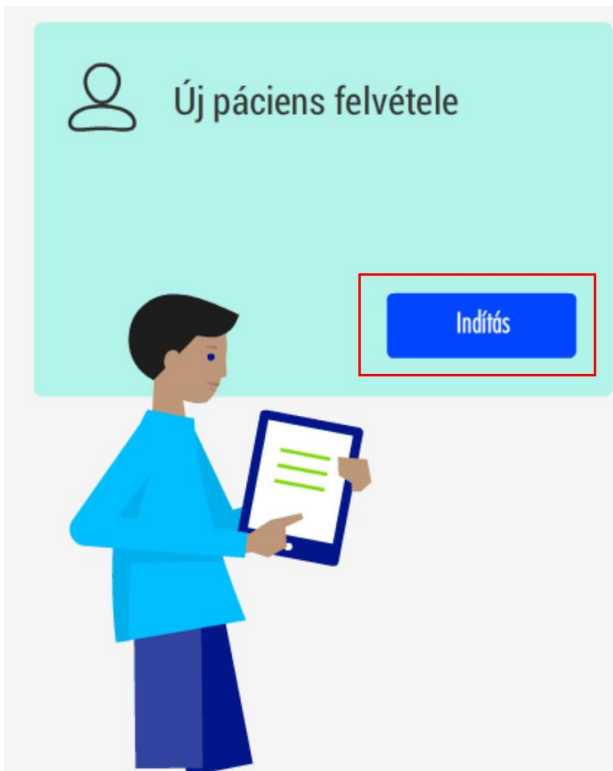

Az új páciens adatainak rögzítése során meg kell adnunk a beteg nevét, tajszámát, telefonszámát, lakcímét és email címét. Emellett a „Megjegyzés” menüpontban lehetőségünk van további, a beteggel kapcsolatos információk rögzítésére, legfeljebb kétezer karakter terjedelemben. A tajszám megadása közben az alkalmazás ellenőrzi, hogy a beírt számsor megfelel-e a tajszámok létrehozásához szükséges követelményeknek. Ha a megadott tajszám nem megfelelő, a rendszer nem fogja elfogadni. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy online ellenőrzés – az algoritmus nem az érvényességet, hanem a formátum megfelelőségét vizsgálja.

SebDoki

Adja meg a beteg adatait

Beteg neve
Első Beteg

TAJ szám
██████████

Telefonszám
+36 1234567890

Lakcím
9999, Városnáv, Utcanév 1.

Email cím
elsobeteg@emailcim.hu

Megjegyzés ...

Adatok Mentése

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Amikor a betegnyilvántartásban már nagyobb mennyiségű beteg szerepel, a lista felett elhelyezkedő keresőmező hasznos eszköz lehet a betegek közötti gyors kereséshez.

SebDoki

Válassza ki a beteget a dokumentáláshoz

Keresés a páciens listában
Kezdjen el írni

Első Beteg ██████████



Második Beteg ██████████

Új páciens felvétele

Indítás

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Miután létrehoztuk az első beteget, már elkészíthetjük hozzá az első sebdokumentációt is. Ehhez lépünk vissza a főmenübe a kék navigációs sávon található balra mutató nyíl segítségével. A főmenüben válasszuk az „Új dokumentum készítése” opciót, majd az „Indítás” gombra kattintva indítsuk el a sebdokumentáció létrehozásának folyamatát.

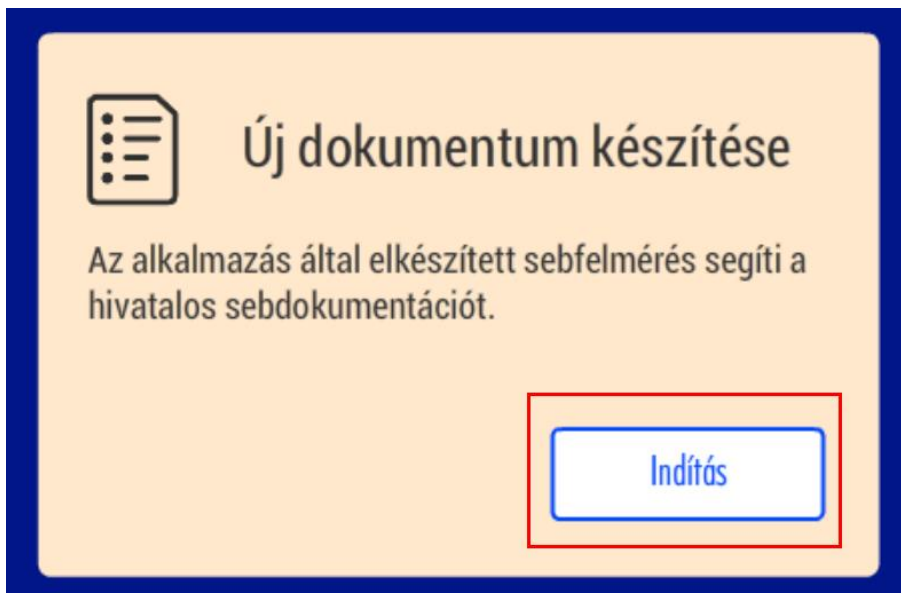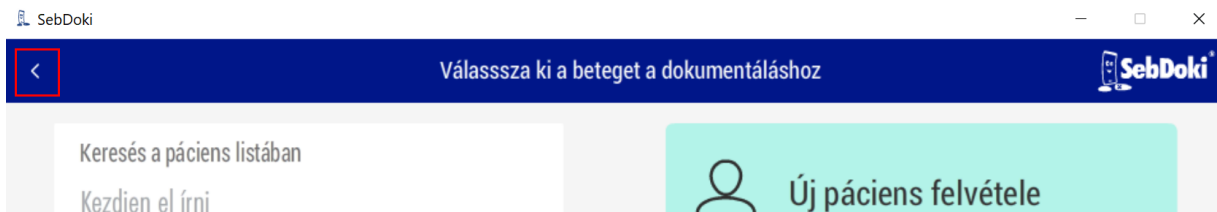

Egy új páciens felvitelét nemcsak a betegnyilvántartó menüből, hanem közvetlenül innen is elindíthatjuk az „Új páciens vizsgálata” opcióval. Ha már egy korábban rögzített betegről van szó, akkor a beteglistából választhatjuk ki azt a páciens, akinek a sebdokumentációját el szeretnénk készíteni.

The screenshot shows the 'SebDoki' web application interface. At the top, there is a blue header with the text 'Új seb dokumentáció készítése' and the 'SebDoki' logo. Below the header is a progress bar with 11 steps, where step 1 is highlighted. The main content area is divided into two sections. On the left, there is a search bar with the text 'Keresés a páciens listában' and 'Kezden el írni'. Below the search bar, there are two input fields: 'Első Beteg' and 'Második Beteg', both containing redacted text. On the right, there is a large orange box with a person icon and the text 'Új páciens vizsgálata'. Below this box, there is a blue button labeled 'Indítás'. At the bottom of the page, there are three logos: 'hartmann.hu', 'hartmannakademia.hu', and 'hartmannwebshop.hu'.

Egy új páciens felvitelét nemcsak a betegnyilvántartóból, hanem közvetlenül innen is elindíthatjuk az „Új páciens vizsgálata” opcióval. Válasszuk ki a listából a már korábban létrehozott beteget. A megjelenő ablakban láthatjuk az előzőleg rögzített adatait. Első lépésként ki kell választanunk a megfelelő BNO kódot, majd rögzíthetjük a beteg anamnéziséét. Hasonlóan a megjegyzés mezőhöz, itt is legfeljebb kétezer karaktert használhatunk.

SebDoki

Vizsgálat indítása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Beteg neve
Első Beteg

Telefonszám
+36 203336543

TAJ szám
[REDACTED]

Lakcím
9999, Városház, Utcanév 1.

Email cím
elsobeteg@emailcim.hu

Anamnézis írása ...

BNO kód
Kérjük válassza ki a megfelelő kódot

Előző

Következő

hartmann.hu

hartmannakademia.hu

hartmannwebshop.hu

A BNO kód kiválasztásakor a listát a kis ablak melletti kurzorral tudjuk felfelé vagy lefelé görgetni, így könnyedén megtalálhatjuk a megfelelő kódot.

SebDoki

Vizsgálat indítása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T31 Égések az érintett testfelület terjedelmének megfelelően osz

174 Artériás embólia és thrombosis

S91 A boka és a lábfej nyílt sebe

177 A artériák és arteriolák egyéb rendellenességei

C32 A gége rosszindulatú daganata

BNO kód

Kérjük válassza ki a megfelelő kódot

Előző

Következő

Telefonszám

+36 203336543

Lakcím

9999, Városnáv, Utcanév 1.

Anamnézis írása ...

hartmann.hu

hartmannakademia.hu

hartmannwebshop.hu

A SebDoki alkalmazás ezt követően lépésről lépésre végig vezet minket a sebdokumentáció elkészítésének folyamatán.

Minden lépésnél meg kell adnunk a szükséges információkat a seb állapotáról, többek között a befolyásoló tényezőkről, a seb elhelyezkedéséről, a seb felszínéről, a seb váladékaról, környezetéről és típusáról.

A válaszadás legtöbb esetben egy egyszerű, úgynevezett „checkbox” segítségével történik, amelyet jelölőnégyzetként vagy csúszkás négyzetként is ismerhetünk.

SebDoki




Válassza ki, hogy mely tényezők befolyásolták a seb kialakulását

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Befolyásoló tényezők

Életkor <input checked="" type="checkbox"/>	Immobilitás <input checked="" type="checkbox"/>
Malnutrició <input type="checkbox"/>	Allergia <input type="checkbox"/>
Diabetes mellitus <input type="checkbox"/>	Nyiroködéma <input type="checkbox"/>
Vitaminhiány <input checked="" type="checkbox"/>	Neurológiai zavarok <input type="checkbox"/>
Artériás keringési rendellenesség <input type="checkbox"/>	Egyéb
Krónikus vénás keringési elégtelenség <input type="checkbox"/>	

[Előző](#) [Következő](#)

 hartmann.hu  hartmannakademia.hu  hartmannwebshop.hu

A seb elhelyezkedésének megadásakor válthatunk az emberi alak teljes nézete és a lábra fókuszált nézet között. Emellett különböző perspektívák közül is választhatunk, például előlnézet, hátulnézet vagy oldalnézet. A seb pontos helyét a villogó kör alakú jelölő segítségével tudjuk megadni, amelyet egyszerűen a kívánt pontra húzunk, majd ott elhelyezünk.

SebDoki

Válassza ki, hogy mely tényezők befolyásolták a seb kialakulását

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Seb elhelyezkedése

Előlnézet

Sebgyógyulási fázis (összesen 100%)

Exudációs fázis	0 %
Granulációs fázis	0 %
Epitelizációs fázis	0 %

Előző

Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

A seb gyógyulási fázisának megadásakor az alkalmazás automatikusan módosítja az utolsó értéket, mert nem haladhatja meg a 100-at.

Ez az érték a seb gyógyulásának előrehaladottságát jelzi.

SebDoki

Válassza ki, hogy mely tényezők befolyásolták a seb kialakulását

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Seb elhelyezkedése

Bal láb

Sebgyógyulási fázis (összesen 100%)

Exudációs fázis	35 %
Granulációs fázis	32 %
Epitelizációs fázis	33 %

Előző

Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

A seb felszínének méretét milliméterben kell megadnunk, ezzel biztosítva a pontos és precíz dokumentációt.

SebDoki

Kérjük válassza ki a sebfelzínre jellemzőket és adja meg a méreteit

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Sebfelszín

Nekrotikus

Lepedékes

Biofilmmel fedett

Fertőzött

Sarjadzó

Hámosodó

Hosszúság 45 mm

Szélesség 34 mm

Mélység 9 mm

Alávájt Igen Nem

Előző

Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

SebDoki

Kérjük válassza ki a sebváladék mennyiségét és jellegét az alábbiak közül

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Váladék mennyisége

Nincs

Kevés

Közepes

Bő

Váladék jellege

Gennyes

Véres

Savós

Előző Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Ha a felületen egy körben „i” betűt látunk, az azt jelzi, hogy az adott választási lehetőségnél további információ érhető el. Az „i” ikonra kattintva megjelenik a kapcsolódó plusz információ, amely segíthet a pontosabb döntéshozatalban vagy a választás megértésében.

SebDoki

Kérjük válassza ki a seb szagára és a sebkörnyékére jellemzőket az alábbiak közül

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Szag

Nincs

Enyhe

Erős

Sebkörnyék

Nyugodt

Duzzadt

Gyulladt

Száraz

Macerált

Egyéb

Írja le ide, mi az egyéb jellemző a sebkörnyékre

Előző Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

SebDoki

Kérjük adja meg a fájdalom erősségét és a seb típusát

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Fájdalom

Nincs

Enyhe

Közepes

Erős

Nagyon erős

A seb típusa

Nyomási fekély (Decubitus)

Ulcus cruris

Egyéb

Előző

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Ha a seb típusánál a „Nyomási fekély” opciót választjuk, ki kell töltenünk a bővített Norton skálát. Az itt megadott válaszok alapján a SebDoki automatikusan kiszámítja a Norton skála eredményét, és ennek alapján meghatározza, hogy a beteg melyik rizikó kategóriába tartozik.

SebDoki

Kérjük töltsse ki a beteg jelenlegi állapotának megfelelően

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Bővített Norton skála

	4	3	2	1
Kooperációs készség, motiváció	Jó	Kissé csökkent	Részleges	Nincs
Életkor	10 év alatt	11-30 év	31-60 év	61 év felett
Bőr állapota	Ép, sértetlen	Száraz, hámló	Nedves, nyirkos	Serült, repedezett, allergiás
Kisérő betegségek	Nincs	Könnyebb	Középsúlyos	Súlyos
Általános állapot	Jó	Kielégítő	Rossz	Nagyon rossz
Mentális státusz	Éber	Fásult	Zavart	Kábult, öntudatlan
Aktivitás	Járóképes	Járás segítségével	Kerekesszék szükséges	Ágyban fekvő
Mobilitás	Teljes	Kissé akadályozott	Nagyon akadályozott	Immobil
Inkontinencia	Nincs	Alkalmasszerű	Gyakori vizelet	Teljes vizelet-széklet

I. stádium

II. stádium

III. stádium

IV. stádium

Norton Skála eredménye
Közepes rizikó kategória **24** pont

Előző

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Ha a seb típusánál az „Ulcus cruris” opciót választjuk, meg kell határozni a seb eredetét (például vénás, artériás vagy vegyes eredetű), valamint a Fontain-stádiumot, amely a seb állapotának és súlyosságának megfelelő besorolást ad.

SebDoki

Kérjük adja meg a fájdalom erősségét és a seb típusát

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fájdalom

Nincs

Enyhe

Közepes

Erős

Nagyon erős

A seb típusa

Nyomási fekély (Decubitus)

Ulcus cruris

Egyéb

Előző

Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

SebDoki

Kérjük töltsse ki a beteg jelenlegi állapotának megfelelően

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ulcus cruris

Vénás eredetű

Artériás eredetű

Kevert eredetű

Fontain stádium I.

Fontain stádium II.

Fontain stádium III.

Fontain stádium IV.

Kompressziós terápia


Igen Nem

Előző

Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

A sebdokumentációhoz legfeljebb 4 fényképet csatolhatunk. A „Fotók hozzáadása” menüpontban a középben található pluszjelre kattintva kiválaszthatjuk, hogy a gépen melyik könyvtárban található a sebekről készült képek. A kiválasztott fotókat ezután a pluszjel alatt megjelenő pipa ikonra kattintva tudjuk hozzáadni a dokumentációhoz.

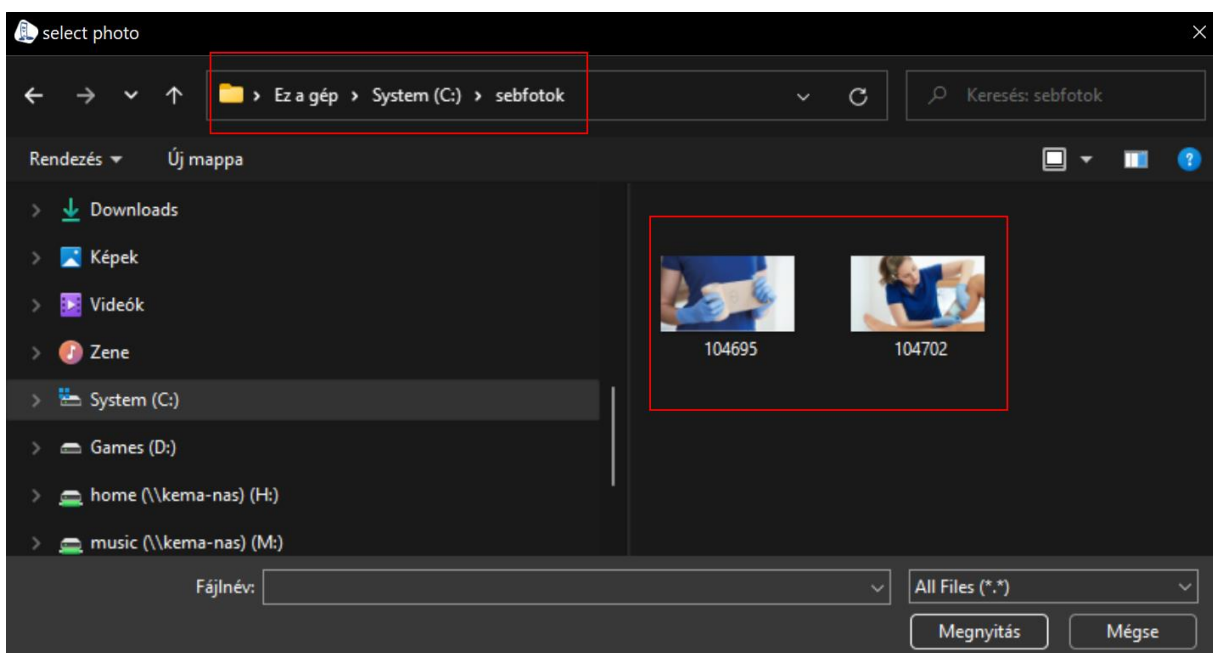

Kérjük csatolja a sebről készített fotókat az alábbiakban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fotók hozzáadása

Előző

Következő

Kérjük csatolja a sebről készített fotókat az alábbiakban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fotók hozzáadása

Előző

Következő

A fotók hozzáadása után befejeztük a sebdokumentáció elkészítését. Lehetőségünk van az összesített adatokat átnézni az összesítés ablak melletti görgetősáv (scroll gomb) fel-le mozgatásával. Emellett további megjegyzéseket is írhatunk, amelyeknél szintén karakterlimit van, amit szükség esetén a rendszer jelez. A sebdokumentáció véglegesítéséhez kattintsunk a „Seb felmérő mentése” gombra. Ha a mentés sikeres, egy zöld mezőben megjelenő „A mentés megtörtént” üzenet fogja ezt jelezni.

SebDoki

Az alábbi mezőben lehetősége van további információ megadására

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Összesítés

Sebgyógyulási fázis (összesen 100%)	
Exudációs fázis	35%
Granulációs fázis	32%
Epilezációs fázis	33%

Előző

Megjegyzés

Sebfelmérő mentése

A mentés megtörtént

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Ugyanennek a betegnek egy újabb sebdokumentáció elkészítésekor nem szükséges minden adatot újból megadni. A pluszjelre kattintva kiválaszthatunk egy korábban készített sebdokumentációt, amelynek tartalmát a rendszer automatikusan betölti. Így csak az esetleges változásokat kell rögzítenünk, ezzel jelentősen megkönnyítve és felgyorsítva a dokumentáció elkészítését.

SebDoki

Vizsgálat indítása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Beteg neve
Első Beteg

Telefonszám
+36 203336543

TAJ szám
[REDACTED]

Lakcím
9999, Városnáv, Utcanév 1.

Email cím
elsobeteg@emailcim.hu


Anamnézis írása ...

BNO kód
Kérjük válassza ki a megfelelő kódot

Előző

Következő

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Vizsgálat indítása 

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Beteg neve
Első Beteg

TAJ szám
111000111

Email cím
elsobeteg@emailcim.hu

BNO kód
Kérjük válassza ki a megfelelő kódot

2025.01.30. 10:57 | Seb Doki

Anamnézis írása ...

Előző Következő



hartmann.hu



hartmannakademia.hu



hartmannwebshop.hu

Ez egy anamnézis leírása.

25 / 2000 max karakter Következő

Egy korábbi sebdokumentáció betöltésekor két fontos dologra kell figyelniük.


Először is, a seb elhelyezkedését a rendszer nem hozza át a korábbi dokumentációból, ezért azt újra meg kell adnunk.

Másodszor, a korábban használt fotók sem töltődnek be automatikusan, így az újonnan készült képeket a korábban ismertetett módon kell hozzáadnunk a sebdokumentációhoz.

1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11

Seb elhelyezkedése

Bal láb

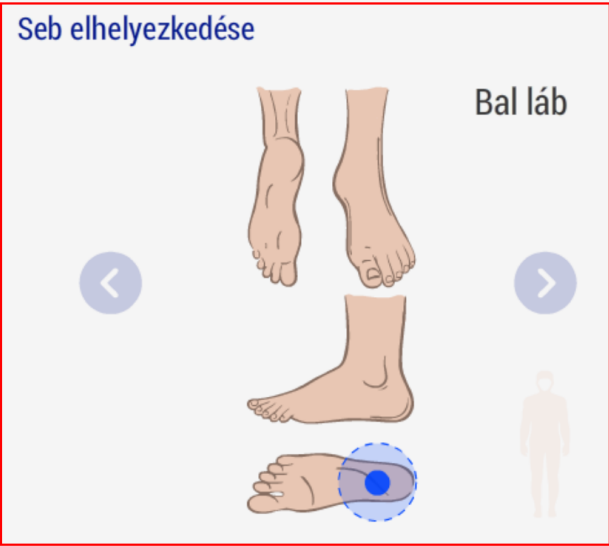

< >

Előző

Sebgógyulási fázis (összesen 100%)

Exudációs fázis	22 %
Granulációs fázis	44 %
Epitelizációs fázis	34 %

Következő

Most lépünk vissza a főmenübe, majd válasszuk ismét a betegnyilvántartót. A betegek listájából válasszuk ki azt a páciens, akinek a dokumentációját meg szeretnénk tekinteni. Miután kiválasztottuk a beteget, lehetőségünk nyílik a sebdokumentációk megtekintésére, az adatok módosítására, valamint a beteg fiókjának archiválására, ha szükséges.

SebDoki

Páciens adatainak kezelése

Páciens adatai Sebdokumentációk Adatok módosítása Fiók archiválása

Beteg neve
Első Beteg

Email cím
elsobeteg@emailcim.hu

TAJ szám
[REDACTED]

Telefonszám
+36 203336543

Lakcím
9999, Városnév, Utcanév 1.

Nincs megjegyzés

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

A seb dokumentációk opciót kiválasztva listában megjelenik a beteghez készített összes dokumentáció. Egy sebdokumentációt kiválasztva a jobboldali mezőben megjelenik a dokumentáció tartalma és a jobboldali csúszkával tudunk fel le mozogni a tartalmában.

Egy dokumentáció megnyitásánál további lehetőségeink vannak például el tudjuk küldeni emailben. Itt fontos megjegyezni, hogy a SebDoki alkalmazásban nincs beépített email küldési funkció. A küldés emailben opcióval a Windowsra telepített és beállított levelező klienst nyitjuk meg úgy, hogy behelyezzük csatolt fájlként PDF ben a dokumentációt.

Páciens adatainak kezelése

Páciens adatai Sebdokumentációk Küldés email-ben PDF mentése Nyomtatás Sebfelmérő törlése

Beteg neve
Első Beteg

TAJ szám
[redacted]

Telefonszám
+36 203336543

Lakcím
9999, Városnév, Utcanév 1.

Exudációs fázis 35%

Granulációs fázis 32%

Epitelizációs fázis 33%

Sebfelszín

Lepedékes Igen

Hosszúság 45mm

Szélesség 34mm

Mélység 9mm

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Lehetőségünk van a dokumentációt PDF ben elmenteni, ehhez ki kell választani azt a könyvtárat, ahova menteni szeretnénk a fájlt. A pdf fájl neve tartalmazza a beteg nevét és a dokumentáció készítésének időpontját.

Fájlnév: Második_Beteg_2025_01_30_11_48
Fájl típusa: All Files (*.*)

Ha ki szeretnénk nyomtatni a dokumentációt, akkor a nyomtatás gombra kattintva tudjuk elindítani ezt a folyamatot, ehhez egy beállított működő nyomtatónak kell lennie a gépen. Ha a dokumentációval probléma van akkor a seb felmérő törlése gombbal tudjuk ezt az adatbázisból törölni.

SebDoki

Páciens adatainak kezelése

Páciens adatai Sebdokumentációk Összehasonlítás

Beteg neve
Első Beteg

TAJ szám
[REDACTED]

Telefonszám
+36 203336543

Lakcím
9999, Városház, Utcanév 1.

2025.01.30. 10:57 | Seb Doki

2025.01.30. 11:01 | Seb Doki

2025.01.30. 11:13 | Seb Doki


hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

2025.01.30. 10:57 | Seb Doki

2025.01.30. 11:01 | Seb Doki

2025.01.30. 11:13 | Seb Doki

Lehetőségünk van az elkészített sebdokumentációk összehasonlítására is. Az „Összehasonlítás” gombra kattintva a csúszkaválasztón (checkbox) kijelölhetünk két dokumentációt, amelyeket az alkalmazás automatikusan összehasonlít. Az eltéréseket jól láthatóan megjelöli, így könnyen észlelhetjük, hogy mely sorokban található különbségek. Ezzel a funkcióval hatékonyan nyomon követhetjük a seb állapotában bekövetkezett változásokat és az esetleges javulást vagy romlást.

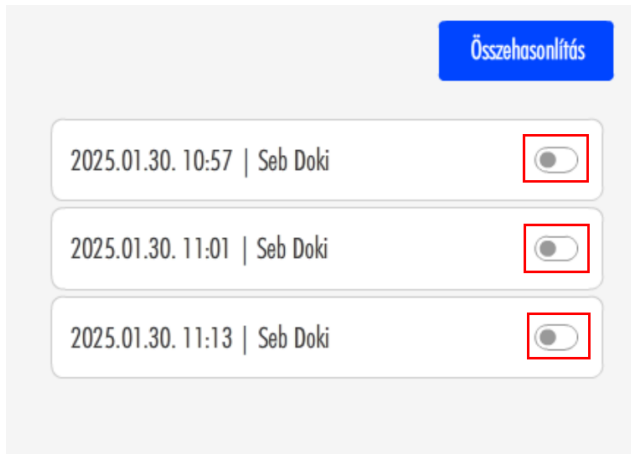

SebDoki

SebFelmérők összehasonlítása

2025.01.30. 10:57

Anamnézis

BNO kód: S91 A boka és a lábfej nyílt sebe

-

Befolyásoló tényezők

Életkor	Igen
Malnutrició	-
Diabetes mellitus	-
Vitaminhiány	Igen
Artériás keringési rendellenesség	-
Krónikus vénás keringési elégtelenség	-
Immobilitás	Igen
Allergia	-
Nyiroködéma	-
Neurológiai zavarok	-
Egyéb	-

Sebgyógyulási fázis összesen 100%

Exudációs fázis: 35% Granulációs fázis: 32% Epitelizációs fázis: 33%

Sebfelszín

2025.01.30. 11:01

Anamnézis

BNO kód: S91 A boka és a lábfej nyílt sebe

-

Befolyásoló tényezők

Életkor	Igen
Malnutrició	-
Diabetes mellitus	-
Vitaminhiány	Igen
Artériás keringési rendellenesség	-
Krónikus vénás keringési elégtelenség	-
Immobilitás	Igen
Allergia	-
Nyiroködéma	-
Neurológiai zavarok	-
Egyéb	-

Sebgyógyulási fázis összesen 100%

Exudációs fázis: 22% Granulációs fázis: 44% Epitelizációs fázis: 34%

Sebfelszín

hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Befolyásoló tényezők		Befolyásoló tényezők	
Életkor	Igen	Életkor	-
Malnutrició	-	Malnutrició	Igen
Diabetes mellitus	-	Diabetes mellitus	-
Vitaminhiány	Igen	Vitaminhiány	-
Artériás keringési rendellenesség	-	Artériás keringési rendellenesség	Igen
Krónikus vénás keringési elégtelenség	-	Krónikus vénás keringési elégtelenség	-
Immobilitás	Igen	Immobilitás	Igen
Allergia	-	Allergia	-
Nyiroködéma	Igen	Nyiroködéma	Igen
Neurológiai zavarok	-	Neurológiai zavarok	-
Egyéb		Egyéb	

SebDoki

SebFelmérők összehasonlítása

További információ



További információ



hartmann.hu hartmannakademia.hu hartmannwebshop.hu

Ha bármilyen kérdése vagy javaslata van a programmal kapcsolatban, kérjük, küldje el az **info@sebdoki.hu** email címre.

****Köszönjük, hogy a SebDoki alkalmazást használja!****

****HARTMANN-RICO HUNGÁRIA Kft.****

Minden jog fenntartva. (2025)